

# Instructions for use



Sanquin Reagents B.V.  
Plesmanlaan 125  
1066 CX Amsterdam  
The Netherlands

Phone: +31 20 5123599  
Fax: +31 20 5123570  
Reagents@sanquin.nl  
www.sanquin.org/reagents

**Cellbind incubator**

REF K7314

IVD CE

090\_v01 09/2019 (cz)

Pouze pro profesionální použití

## Stručný návod, jak začít používat inkubátor Cellbind

Přístroj by měl být používán výhradně k určenému účelu, v dokonalém technickém stavu, kvalifikovaným personálem a za přísného dodržování všech platných bezpečnostních norem pro prevenci nehod. Bližší pokyny jsou uvedeny v Příručce pro uživatele Allsheng K37-24 a v Návodu k použití níže uvedených produktů.

### Obecné informace

Inkubátor Cellbind se používá k inkubaci karet Cellbind s mikrosloupci. Při použití systému je nutno každý den nejméně jednou použít PeliControl (REF K1379). V případě neúspěšného výsledku testů kontroly kvality musí být zjištěn důvod. Dokud nebude takový problém vyřešen, laboratorní testy by se neměly považovat za spolehlivé.

### Preventivní opatření

Viz Návod k použití výše uvedených výrobků.

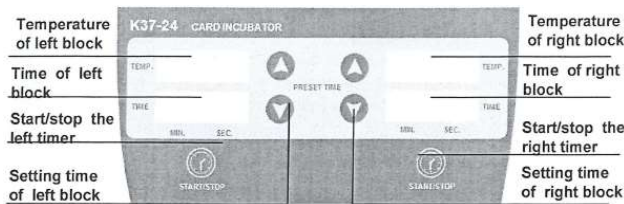

Nesprávné použití a manipulace mohou vést k ohrožení života a končetin uživatele nebo třetích stran, dále k poškození přístroje nebo jiného hmotného majetku. Přístroj by se měl používat pouze pro konkrétní aplikace a pouze pokud je v bezvadném technickém a bezpečném stavu.

### Činidla

Společně s inkubátorem Cellbind lze používat následující karty s mikrosloupci:

Cellbind Screen	REF K7000	CE
Cellbind Direct	REF K7011	CE
Cellbind Direct Type	REF K7012	CE

## Provozní příručka

- Zapnutí**  
Zapněte hlavní spínač. Inkubátor je připraven k provozu, jakmile se zobrazí displej.
- Ovládací prvky**  

- Nastavení měření času**  
Stiskněte „▲“ nebo „▼“ k nastavení časovače od 1 sekundy do 99 min 59 s.  
Když stisknete „▲“ nebo „▼“, číslice na místě jednotek začne blikat a čas lze změnit. Blikání po 6 sekundách ustane a rozhraní pro nastavení se ukončí.  

- Nastavení teploty**  
Výchozí nastavení je 37 °C.
- Spuštění a zastavení**  
Přístroj se začne automaticky nahřívat podle nastavené teploty. Levý ovladač „START/STOP“ ovládá levý blok a pravý ovladač „START/STOP“ ovládá pravý blok.
- Až teplota kteréhokoli bloku dosáhne 37 °C, vložte do bloku kartu/karty Cellbind, poté zavřete víko a stiskněte ovladač „START/STOP“ ke spuštění časovače bloku.
- Jakmile časovač dojde k 0, zazní alarm a na displeji se zobrazí „OVER“ (SKONČENO). Pro návrat stiskněte jakékoli tlačítko

## Provozní příručka

nebo „START/STOP“ pro restart časovače.

- 8 K zastavení časovače stiskněte „START/STOP“ po dobu 1 sekundy.

### Výklad

Viz Návod k použití výše uvedených výrobků.

### Omezení

Viz Návod k použití výše uvedených výrobků.

*Záruka na produkty společnosti Sanquin zajišťuje, že budou fungovat tak, jak je popsáno v originálním návodu k použití dodávaném výrobcem. Je naprosto nezbytné, aby byly přesně dodrženy postupy, uspořádání testů a aby byla použita doporučená činidla a vybavení. Pokud dojde k jakémukoli odchýlení od těchto pokynů, společnost Sanquin odmítá veškerou odpovědnost za vzniklé následky.*